


Kett

SCIENCE OF SENSING
測定器のケットです。

FW-100

脱臭風防ケース

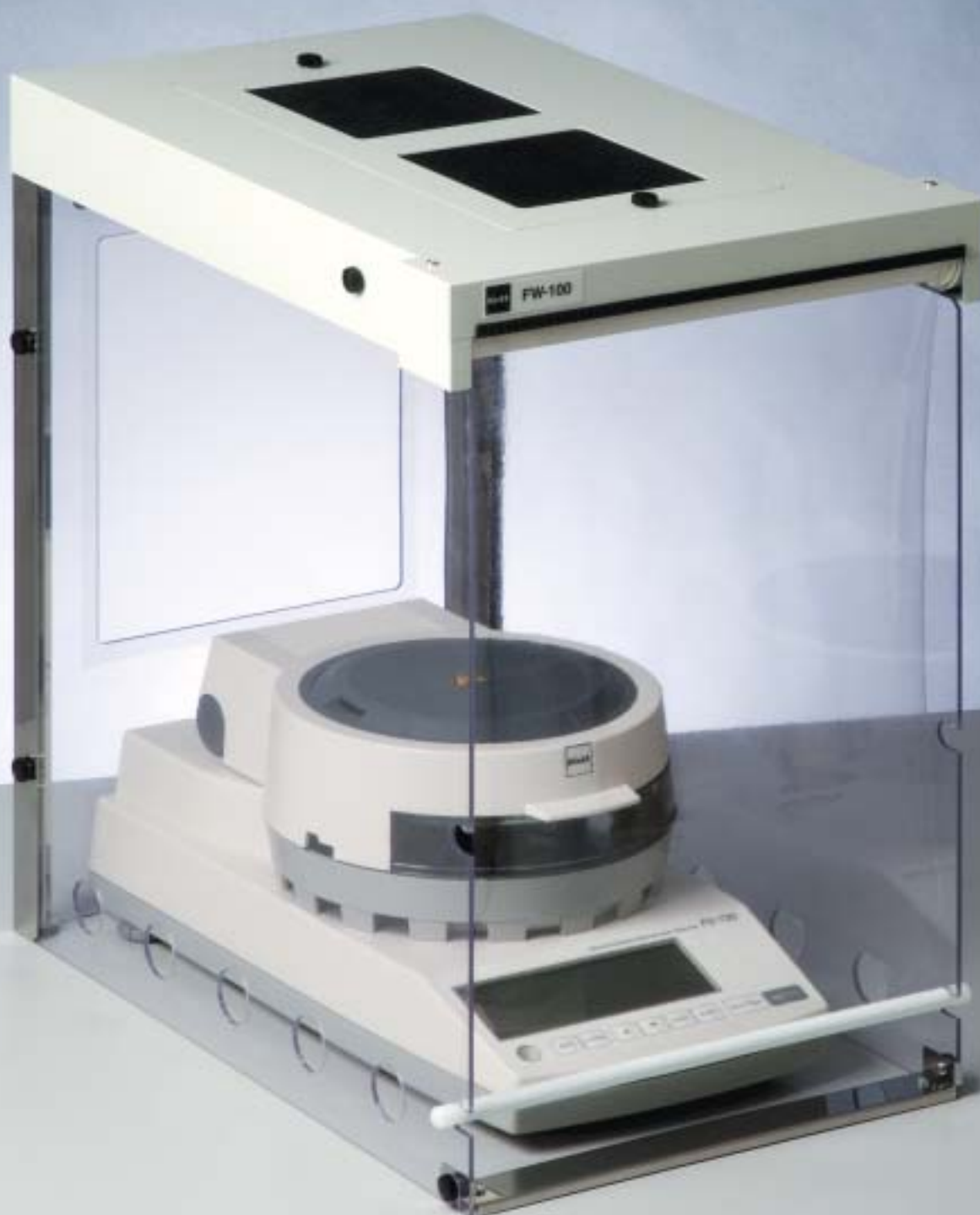

この写真は使用状況のイメージ写真です。また、赤外線水分計は撮影用のもので、FW-100の製品構成には含まれません。

FW-100

脱臭風防ケース

FW-100は赤外線水分計FDシリーズ用の脱臭機能付き風防です。FW-100の中に赤外線水分計を設置することで、高精度天秤が受ける気流による影響を最少とすることができます。さらに、試料の種類によっては水分測定時に悪臭が発生しますが、脱臭フィルタがこの悪臭を軽減させます。




FW-100に赤外線水分計FD-720をセットした例

仕様 FW-100

| | |
|---------|--|
| 寸法(組立時) | 333(W)×465(D)×509(H)mm |
| 質量 | 5.3kg |
| 対応器種 | FD-720、FD-620、FD-610、FD-600、FD-240等 |
| セット内容 | 上蓋(シャッター、脱臭フィルタ×2含む) 側面パネル×2、裏面パネル、前面金具、取扱説明書 |
| 交換部品 | 脱臭フィルタ |

各部名称

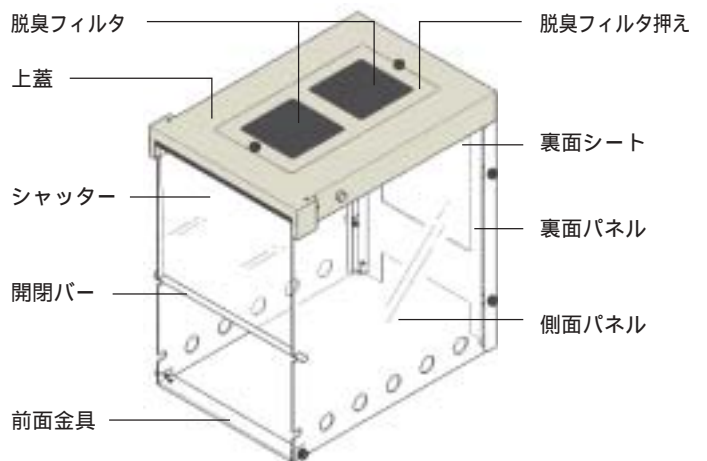

Kett 株式会社ケツト科学研究所

Kett

東京本社 東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507
TEL(03)3776-1111 FAX(03)3772-3001
大阪支店 大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533-0033
TEL(06)6323-4581 FAX(06)6323-4585
札幌営業所 札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063-0841
TEL(011)611-9441 FAX(011)631-9866
仙台営業所 仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル 〒980-0802
TEL(022)215-6806 FAX(022)215-6809
名古屋営業所 名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル 〒450-0002
TEL(052)551-2629 FAX(052)561-5677
九州営業所 佐賀県鳥栖市布津原町14-1 布津原ビル 〒841-0053
TEL(0942)84-9011 FAX(0942)84-9012

ご用命は



このパンフレットは環境にやさしい「水なし印刷」(植物性大豆油インキ「古紙配合率100%再生紙」)を使用しています。