

Kett

SCIENCE OF SENSING
測定器のケツトです。

ソフトカルトン

SOFT CARTON



ソフトカートン

SOFT CARTON

落としても割れないカートン、形状は3種、色も3色です。(小角は青のみです)



●多様な用途に対応する3種の形状と3色のバリエーション。(小角は青のみ)




●ソフトカートンは高所から落下しても、従来品(右)のように欠けません。

●ソフトカートンの種類と販売単位。

名称:大丸カートン 色:黒・白・青 寸法:径180×深さ30mm 販売単位:1箱10枚入			
名称:中丸カートン 色:黒・白・青 寸法:径160×深さ20mm 販売単位:1箱10枚入			
名称:小角カートン 色:青 寸法:100×100×10mm 販売単位:1箱10枚入			

カートンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカートンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカートンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。今回、新たに開発した「ソフトカートン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下などの衝撃による破損はありません。また、試料をカートンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関してはPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EUのRoHs指令をクリアしたものを使用していますので安心です。

●ソフトカートンの形状と寸法

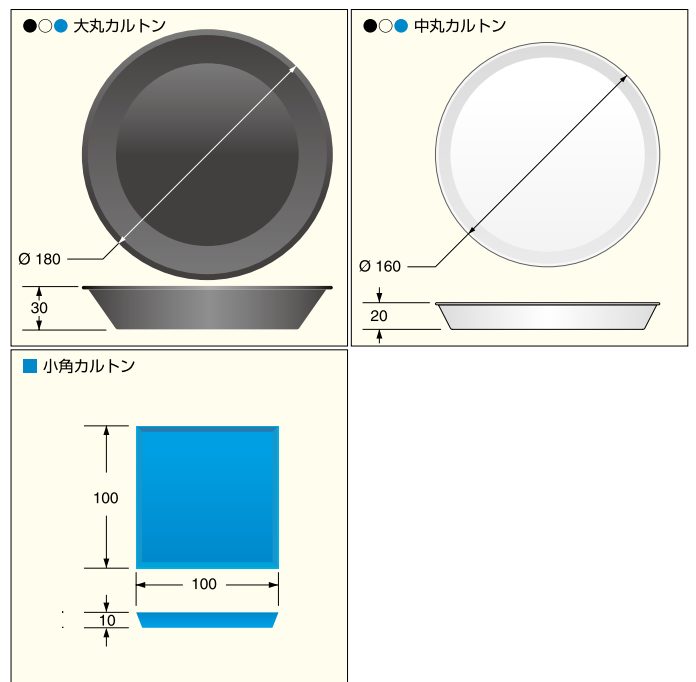

Kett

株式会社ケツト科学研究所

東京本社 東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507
 TEL(03)3776-1111 FAX(03)3772-3001
 大阪支店 大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533-0033
 TEL(06)6323-4581 FAX(06)6323-4585
 札幌営業所 札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063-0841
 TEL(011)611-9441 FAX(011)631-9866
 仙台営業所 仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル 〒980-0802
 TEL(022)215-6806 FAX(022)215-6809
 名古屋営業所 名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル 〒450-0002
 TEL(052)551-2629 FAX(052)561-5677
 九州営業所 佐賀県鳥栖市布津原町14-1 布津原ビル 〒841-0053
 TEL(0942)84-9011 FAX(0942)84-9012



当社の製品は ISO 9001、品質マネジメントシステムに準拠して製作されています。
 適用範囲:水分計、成分分析計、穀粒判別器及び膜厚計の設計、開発、製造管理、校正、修理。

ご用命は



この印刷物は環境への配慮から「植物性大豆油インキ」と「再生紙」を使用しています。